

ビレーズトリ®エアロスフィア®120吸入を使用される患者さんへ
1回2吸入を1日2回おこなってください


吸入器の各部の名称

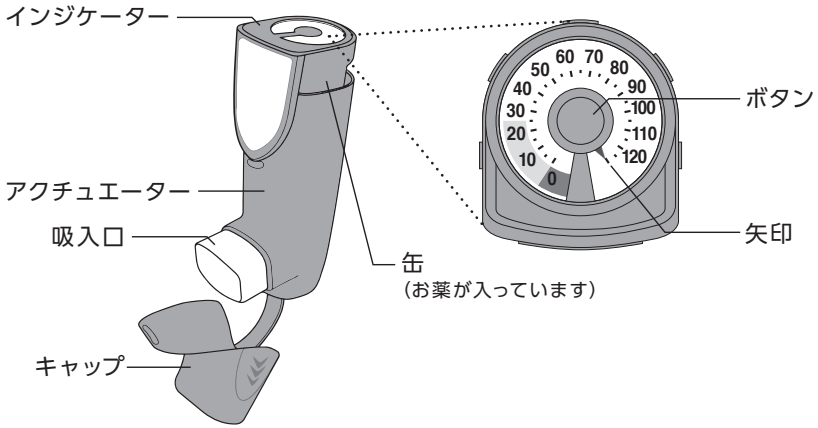

未使用の吸入器をはじめて使用するときの準備操作

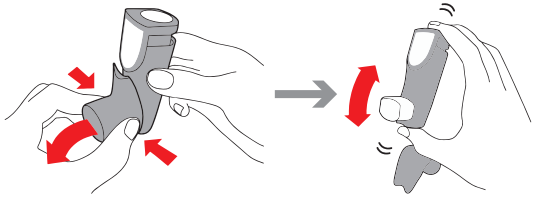

キャップを外し、図のようにボタンが上になるように吸入器を持って、**よく振ります。**

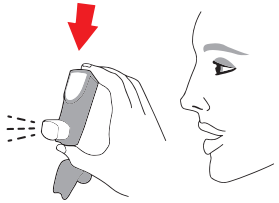


ボタン中央部をしっかり押して、**1度、空噴霧をします。**

※ボタンを押すとお薬が出ますので、顔から離し、眼に入らないように注意してください。


(振る→空噴霧)の操作を、合計で**2度おこないます。**

これで吸入の準備操作が完了しました。
吸入については、**「正しい吸入の方法」**をご確認ください。

正しい吸入の方法

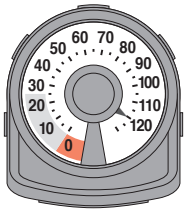


残りの噴霧回数が「0」になっていない(赤色の部分を指していない)ことをご確認ください。

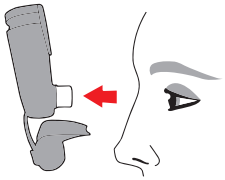

キャップを外し、吸入口や内部に異物がないかご確認ください。

※ボタンを押さないように注意してください。


1

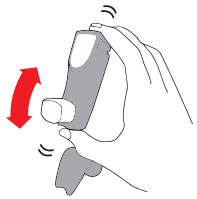

キャップを外し、図のようにボタンが上になるように吸入器を持って、**よく振ります。**

※振るときに、ボタンを押さないように注意してください。

2

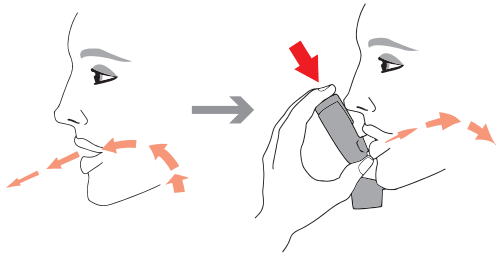

苦しくならない程度に、**息を十分に吐き出します。**

※吸入口に息がかからないように注意してください。

吸入口をくわえ、息をゆっくり・深く吸い込みながら、**ボタン中央部をしっかりと押し、噴霧されるお薬を吸入してください。**

吸入口から唇を離し、3秒以上息を止めた後、息をゆっくりと吐き出します。

1と**2**をもう1度繰り返し、合計**2吸入します。**
吸入が終わったらキャップを閉めます。
最後にうがいをします。うがいが困難な場合は、口の中をすすぎます。

※アクチュエーターは、週に1回洗浄が必要です。洗浄方法は裏面をご確認ください。


以下のような場合は、左記の準備操作(振る→空噴霧)を2度おこなってから使用してください。

- アクチュエーターを洗浄した後
- 吸入器を落としてしまったとき
- 前回使用してから7日以上経過しているとき


インジケーターの表示について

矢印は1噴霧ごとに進み、残りの噴霧回数を示します。

開封時

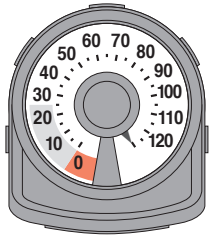


初回の空噴霧分及び、洗浄後の空噴霧分を含めて表示しているため、矢印が「120」を超えた部分を示しています。

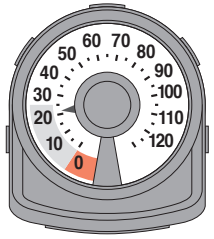

使用を続けると、矢印が黄色の部分を指すようになります。赤色の部分に近づく前に、新しい吸入器をご準備ください。

終了

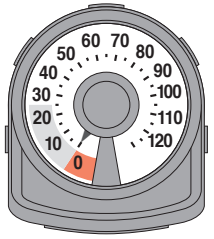

矢印が、赤色の部分の「0」を指したら、新しい吸入器に取りかえてください。

注意

- 本剤は急な症状の悪化を速やかに抑えるお薬ではありません。
- 医師の指示通りに毎日吸入してください。症状の有無にかかわらず、ご自身の判断で吸入の中止・変更をしないでください。
- 使用開始直前にアルミ袋を開封してください。
- アルミ袋開封後は湿気を避けて保存してください。
- アルミ袋開封後、3カ月以上経った場合は、お薬が残っていても廃棄してください。
- 保管の際は同封の携帯袋もご使用いただけます。
- アクチュエーターは週に1回、洗浄してください。
- 缶は空になっても壊したり、穴を開けたり火中に投じないでください。炎や火気の近くで使用したり保管しないでください。
- 地方自治体により定められた廃棄処理法に従ってください。

※疑問点や質問等がある場合は医師または薬剤師にご相談ください。

アクチュエーターの洗浄について

お薬が容器内に付着するときちんと噴霧できなくなるため、
アクチュエーターをきれいに保つことが重要です。
週に1回、ぬるま湯で洗い流してください。

1 アクチュエーターから、**缶を外した後、キャップを外します。**外した缶は濡らさないようにします。

2 アクチュエーターの中を**約30秒間、ぬるま湯で洗い流し**、その後アクチュエーターをさかさまにして、**さらに約30秒間洗い流します。**


アクチュエーターをよく振り、できる限り内部の水を取り除きます。

3 アクチュエーター内と吸入口を確認してください。もし、お薬が付着しているようなら、再度洗い流してください。

4 アクチュエーターを、キャップを外したまま、風通しがよい場所に置いて、しっかりと乾燥させます。**濡れているうちは、缶をセットしないでください。**

5 アクチュエーターが完全に乾いたら、キャップを閉じた後、ゆっくりと缶をアクチュエーターに差し込みます。

6 缶をアクチュエーターに戻した後は、**裏面の準備操作（振る→空噴霧）を2度おこなってから**使用してください。

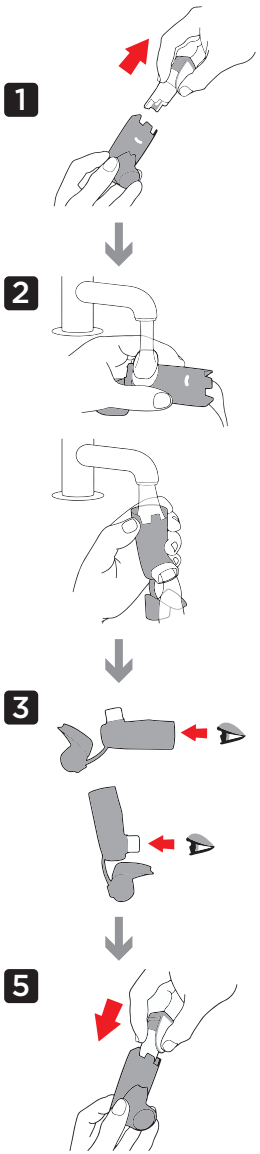

お問い合わせ先

患者様用フリーダイヤル **0120-119-703**（9:00～17:30 土日祝祭日および弊社休業日を除く）

製造販売元 アストラゼネカ株式会社

2021年12月作成
BK018A