

パルミコート®タービューヘイラー® 吸入説明用シート

「クルッ」「カチッ」「スーッ」の3ステップ

【監修】 亀田 誠 先生 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 小児科 主任部長

製品種類と吸入回数



パルミコート®100µgタービューヘイラー®112吸入
112回吸入可能



パルミコート®200µgタービューヘイラー®56吸入
56回吸入可能



パルミコート®200µgタービューヘイラー®112吸入
112回吸入可能



パルミコート[®]タービュヘイラ[®]を使用される患者さんへ

【監修】 亀田 誠 先生 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 小児科 主任部長

使用する薬剤

- ☐ パルミコート[®]100 μ gタービュヘイラ[®]112吸入
- ☐ パルミコート[®]200 μ gタービュヘイラ[®]56吸入
- ☐ パルミコート[®]200 μ gタービュヘイラ[®]112吸入

用法・用量

指示された「用法・用量」を守りましょう。

朝 吸入 ・ 夜 吸入

服薬終了日 服薬終了日がきたら、新しい薬を使用しましょう。


年 月 日()



キャップを回して外し、吸入器をまっすぐ立てて持ちます。

新しい吸入器を使用するときは

茶色の回転グリップを左右に回して「カチッ」と2回鳴らします。その後①に進んでください。

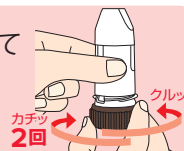

新品を使うときだけですな!



① 右へ「クルッ」と回す

茶色の回転グリップを右へ確実にとまるまで回します。

まっすぐ立てるんですね!



② 左へ「カチッ」と戻す

茶色の回転グリップを左へ「カチッ」と音がするまで戻します。

「カチッ」が吸入できる合図なんですな!



※「カチッ」の音がするまで回します。
この音は1吸入分の薬がセットされた合図です。



吸入する前に息を吐き、茶色の回転グリップを片手で持ちます。

③ 息を吐き、「スーッ」と深く吸い込む

マウスピースをくわえ、「スーッ」と力強く吸い込みます。
口を離してゆっくり息を吐きます。

そきにはいて〜




▲ マウスピースに息をふきかけないでください。

①～③の操作で1吸入となります。
2吸入する場合は、①～③の操作をもう一度行ってください。



最後に必ずうがい
または口すすぎをします。

薬の残量・終了の目安

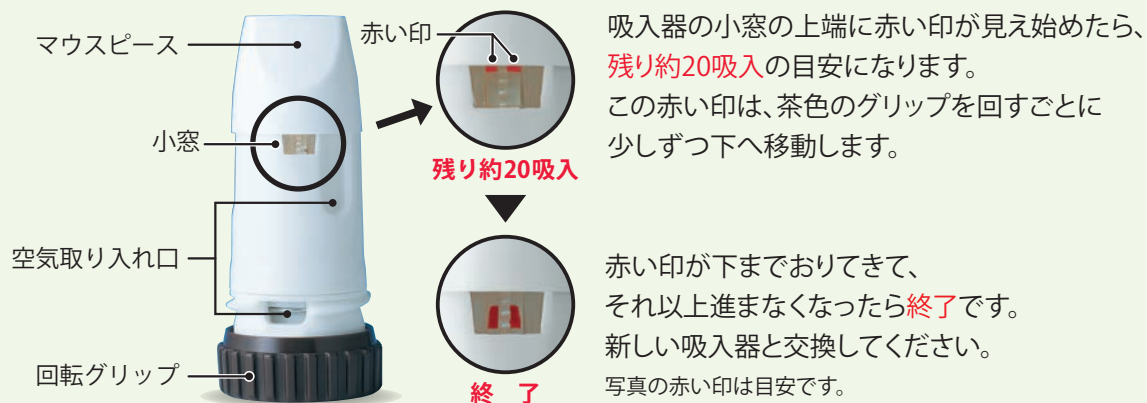

赤い印が下まできても茶色の回転グリップは回り続けます。
吸入器を振ると「カサカサ」と音が聞こえますが、これは乾燥剤の音です。薬剤が残っていることを示すものではありません。



Q&A

ご使用にあたってよくある質問

Q 「クルッ」「カチッ」を2回繰り返せば2吸入分まとめて吸入できますか？

A 2吸入分まとめて吸入はできません。
茶色の回転グリップを何度回しても薬は1吸入分しかセットされません。
2吸入する場合は、①「クルッ」②「カチッ」③「スーッ」の操作を2回行ってください。



Q 赤い印が小窓の下まできたのですが、「カサカサ」音がするからまだ残っていますか？

A 「カサカサ」音がするのは乾燥剤の音です。赤い印が小窓の下までおりてきて、それ以上進まなくなったら終了です。新しい吸入器と交換してください。
赤い印が小窓の下まできたら、吸入終了です。茶色の回転グリップは回り続けますが使用せず、新しい吸入器と交換してください。容器を振ると「カサカサ」音がしますが、これは乾燥剤の音です。



Q 吸った感じがしないのですが、きちんと吸入できていますか？

A ①「クルッ」②「カチッ」③「スーッ」の操作をきちんとしていれば、吸入できています。
1回の吸入量がごくわずかなので、刺激が少なく吸った感じはしませんが、「クルッ」「カチッ」「スーッ」の操作をきちんと行なえていれば、薬は吸入できています。

製造販売元【文献請求先】

アストラゼネカ株式会社

大阪市北区大深町3番1号

TEL 0120-189-115

(問い合わせ先フリーダイヤル メディカルインフォメーションセンター)

医療従事者向けチャットボットAZtreat : <https://med.astrazeneca.co.jp/product/aztreat.html>
Medichannel : <https://med.astrazeneca.co.jp/index.html>

PUL603@H
2024年4月作成